

お客様 各位



◆ 住友ベークライト株式会社

ヘルスケア営業本部

〒140-0002 東京都品川区東品川 2-5-8

(天王洲パークサイドビル)

TEL.03-5462-4824 FAX.03-5462-4894

## SBバックの仕様変更について

拝啓 時下益々ご清栄の事とお慶び申し上げます。

平素は弊社「sumius」ブランドの医療機器製品をご愛顧賜り、厚く御礼申し上げます。

さてこの度、弊社製品「SBバック」の「吸引器」「キャリングバッグ」「スーパースムーズタイプ用ジョイント(リブ付)」「吸引器用内袋」「内箱」について、変更を行いましたので、ご案内申し上げます。

今後とも、よりよい製品を目指して心掛けてまいる所存ですので、より一層のご愛顧を賜りたく重ねてお願い申し上げます。

敬具

記

### 1.変更の概要

各種変更内容については別紙1に記載の通りです。

### 2.対象品

製品名:SBバック

対象製品の詳細は別紙2に記載の通りです。

### 3.出荷開始時


2019年6月頃より順次出荷予定ですが、在庫状況により切替わり時期が前後する場合がございます。予めご了承くださいようお願い申し上げます。


以上

[変更内容]


吸引器 変更

変更前





変更後





変更内容

変更部位	変更前	変更後
①	マジックテープにより着脱が可能	両面テープにより固定
②	連結チューブの着脱が可能	連結チューブを接着により固定


キャリングバッグ 変更

変更前

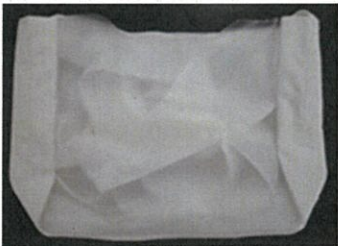



変更後





変更内容

キャリングバッグに入れた状態で床置きした際のボトル転倒を防止するため、マチ付きからマチ無しにして床置き転倒を防止する形状に見直し致します。ご使用時は吊下げてご使用ください。


スーパースムーズタイプ用ジョイント(リブ付) 変更

変更前





変更後



変更内容

Yコネクターへの取付を容易且つ外れにくいようYコネクター接続部の形状を変更致します

[変更内容]

吸引器用内袋 変更

変更前



変更後



変更内容

吸引器が取り出しやすいよう全長を短くし、上部の折り返しを廃止致します。

内箱 変更

変更内容


天面へ表示が見やすいよう品名、チューブ種類、サイズ、バルーンタイプ（低圧のみ表記）を表示致します。

チューブ種類の判別がしやすいよう表示を色により識別を致します。


変更前



変更後

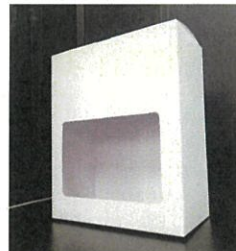

天面

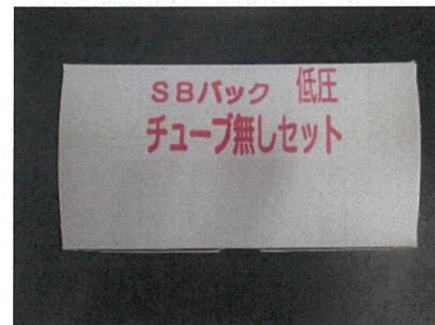

[変更対象製品] ○:変更有り -:変更無し

品番	仕様	吸引器の種類	吸引器変更	ジョイント変更	内袋変更	キャリングバック変更	内箱変更(表示色)	
MD-53300	吸引器	常圧	○	-	○	○	○(赤)	
MD-53600		低圧	○	-	○	○	○(赤)	
MD-53331	塩ビラウンドタイプ	常圧	○	-	○	○	○(黒)	
MD-53341			○	-	○	○	○(黒)	
MD-53351			○	-	○	○	○(黒)	
MD-53361			○	-	○	○	○(黒)	
MD-53631		低圧	○	-	○	○	○(黒)	
MD-53641			○	-	○	○	○(黒)	
MD-53651			○	-	○	○	○(黒)	
MD-53730		シリコーンフルセット	常圧	○	-	○	○	○(緑)
MD-53750				○	-	○	○	○(緑)
MD-53760	○			-	○	○	○(緑)	
MD-5363S	低圧		○	-	○	○	○(緑)	
MD-5365S			○	-	○	○	○(緑)	
MD-53732N	スーパースムーズセット	常圧	○	○	○	○	○(青)	
MD-53752N			○	○	○	○	○(青)	
MD-53762N			○	○	○	○	○(青)	
MD-53734N			○	○	○	○	○(青)	
MD-53754N			○	○	○	○	○(青)	
MD-53632N		低圧	○	○	○	○	○(青)	
MD-53652N			○	○	○	○	○(青)	
MD-53662N			○	○	○	○	○(青)	
MD-53634N			○	○	○	○	○(青)	
MD-53654N			○	○	○	○	○(青)	
MD-51532N	スーパースムーズチューブ単品	-	-	○	-	-	-	
MD-51552N		-	-	○	-	-	-	
MD-51562N		-	-	○	-	-	-	
MD-Y1060	吸引器	常圧	○	-	○	○	○(赤)	
MD-Y1061	スーパースムーズチューブ単品	-	-	○	-	-	-	
MD-Y1062		-	-	○	-	-	-	
MD-Y1063		-	-	○	-	-	-	
MD-Y8011	塩ビラウンドタイプ	常圧	○	-	○	○	○(黒)	

[変更対象製品] ○:変更有り -:変更無し

品番	仕様	吸引器の種類	吸引器変更	ジョイント変更	内袋変更	キャリングバック変更	内箱変更(表示色)		
MD-53300A	吸引器	常圧	※	-	○	○	○(赤)		
MD-53600A		低圧	※	-	○	○	○(赤)		
MD-53331A	塩ピラウンドタイプ	常圧	※	-	○	○	○(黒)		
MD-53341A			※	-	○	○	○(黒)		
MD-53351A			※	-	○	○	○(黒)		
MD-53361A			※	-	○	○	○(黒)		
MD-53631A		低圧	※	-	○	○	○(黒)		
MD-53641A			※	-	○	○	○(黒)		
MD-53651A			※	-	○	○	○(黒)		
MD-53732A			スーパースムーズタイプ	常圧	※	対応済み	○	○	○(青)
MD-53752A					※	対応済み	○	○	○(青)
MD-53762A					※	対応済み	○	○	○(青)
MD-53734A	※	対応済み			○	○	○(青)		
MD-53754A	※	対応済み			○	○	○(青)		
MD-53632A	低圧	※		対応済み	○	○	○(青)		
MD-53652A		※		対応済み	○	○	○(青)		
MD-53662A		※		対応済み	○	○	○(青)		
MD-53634A		※		対応済み	○	○	○(青)		
MD-53654A		※		対応済み	○	○	○(青)		
MD-53631D	塩ピラウンドタイプ	低圧	※	-	○	○	○(黒)		
MD-53651D			※	-	○	○	○(黒)		

※:末尾A、Dの品番はボトル形状が異なるため今回の変更には該当しません。

以上