

シュアプラグ® AD 三方活栓 (三連活栓) 仕様変更および シュアプラグ® AD シリーズ添付文書改訂のご案内

2019年6月
テルモ株式会社

謹啓 平素よりテルモ製品に格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、この度、シュアプラグ AD 三方活栓、シュアプラグ AD 延長チューブ、シュアプラグ AD 輸液セットの三方活栓 (三連活栓) 品種につきまして、下記のとおり仕様変更いたします。また、シュアプラグ AD 三方活栓、シュアプラグ AD 延長チューブ、シュアプラグ AD 輸液セットの全品種においても添付文書の改訂をいたしますので、ご案内申し上げます。


敬白

記


■ 変更内容

①三方活栓同士の接続強度向上およびプレート不要時に取り外しが可能となるよう、接着部とプレート部の仕様を変更いたします。

・シュアプラグ AD 三方活栓

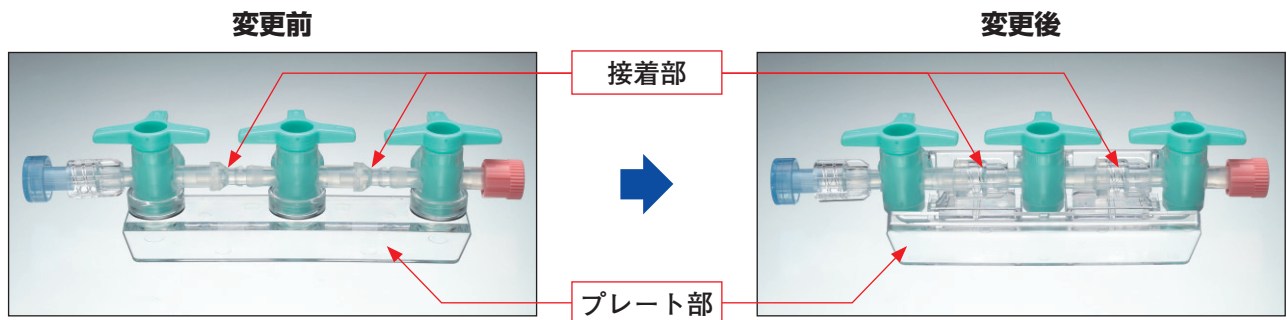

・シュアプラグ AD 延長チューブ、シュアプラグ AD 輸液セット

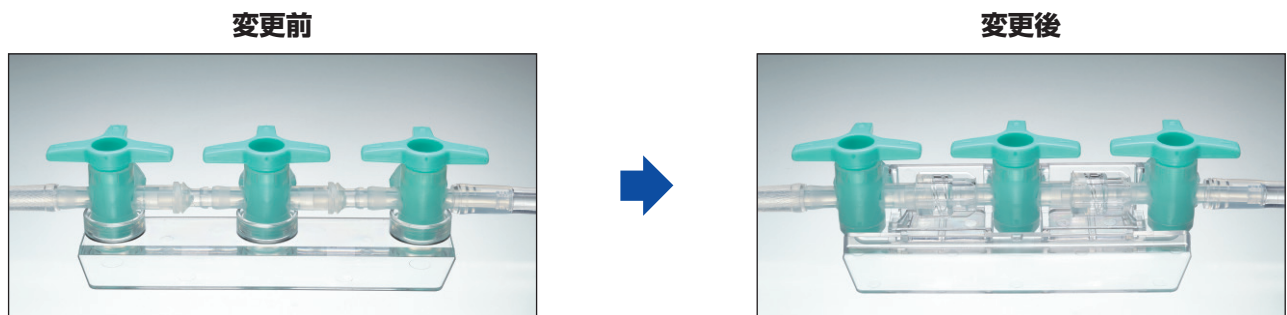

■ 変更対象品種 (仕様変更)

品名	コード番号	共通商品コード (JAN)
シュアプラグ AD 三方活栓	SA-3TR3	4987350615275
シュアプラグ AD 延長チューブ	SA-ES150300Z	4987892029479
	SA-ES250300	4987350239099
シュアプラグ AD 輸液セット	SA-PNT330MNZ	4987892030192
	SA-PCT330NMZ	4987350007056
	SA-PCT330UM	4987350962652

裏面もご覧ください


②仕様変更に伴い、添付文書の【使用方法等】＜使用方法等に関連する使用上の注意＞にプレート部の取り外しに関する注意文を追加いたします。

例) シュアプラグAD三方活栓

【使用方法等】
＜使用方法等に関連する使用上の注意＞

(13) 本品（3連）の固定プレートを外す場合は、以下の事項を順守すること。

① 本体底面の孔（2箇所）に先の細いものを挿入し、ツメを内側に押し込んで嵌合を解除した後、固定プレートをまっすぐに引き抜くこと。[斜めに引き抜くと、補助具が破損する可能性がある。]

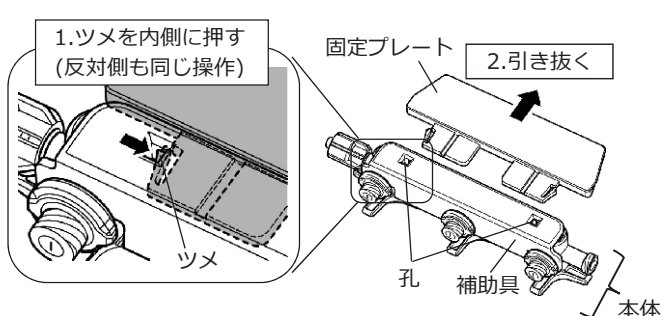

② 外した固定プレートは再装着しないこと。[固定プレートが抜けやすくなり、意図せず外れる可能性がある。]

また、テルモ製品の添付文書における記載文言統一等のための改訂をいたします。

- **変更対象品種**（添付文書改訂）
- | | |
|----------------|-------|
| シュアプラグAD三方活栓 | } 全品種 |
| シュアプラグAD延長チューブ | |
| シュアプラグAD輸液セット | |

- **変更開始時期** 2019年7月より順次
※在庫状況により変更品がお手元に届く時期が前後する場合がありますが、ご了承ください。

一般的名称：輸液ポンプ用ストップコック
販売名：シュアプラグAD三方活栓 医療機器認証番号：225AABZX00139

一般的名称：輸液ポンプ用延長チューブ
販売名：シュアプラグAD延長チューブ 医療機器認証番号：225AABZX00143

一般的名称：自然落下式・ポンプ接続兼用輸液セット
販売名：シュアプラグAD輸液セット 医療機器認証番号：225AABZX00142